ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Leżanka kosmetyczna Spa Azzurro 838
4 silniki, podgrzewana



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scan for different languages


Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Instrukcja montażu

1. Wyjmij leżankę z kartonu i zdejmij z niej wszystkie elementy opakowaniowa
2. Upewnij się, że urządzenie jest nieuszkodzone
3. Umieść produkt w docelowym miejscu użytkowania
4. Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego

Dane techniczne	
Napięcie znamionowe	220V / 240V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc	135W
Maksymalne obciążenie	200 kg
Materac	wysokość 12cm, obicie z ekoskóry
Waga netto	103 kg

Funkcje pilota

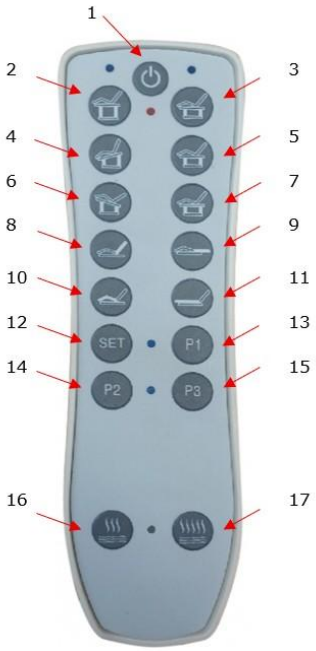

1. Włącz / wyłącz
2. Siedzisko w górę
3. Siedzisko w dół
4. Przednia kolumna w dół
5. Przednia kolumna w górę
6. Tylna kolumna w dół
7. Tylna kolumna w górę
8. Oparcie w górę
9. Oparcie w dół
10. Zgięcie pod kolana aktywne
11. Zgięcie pod kolana nieaktywne (nogi na płasko)
12. Przycisk programowania
13. Program 1
14. Program 2
15. Program 3
16. Podgrzewanie - poziom 1
17. Podgrzewanie - poziom 2


Programowanie leżanki

1. Ustaw leżankę w wybranej pozycji
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, gdy dioda obok zaświeci się na niebiesko wciśnij P1, P2 lub P3. Urządzenie zapamięta ustawienie pod wybranym przyciskiem.

Ogrzewanie – wciśnij wybrany poziom ogrzewania by włączyć, ponowne naciśnięcie dezaktywuje funkcję.

Uwaga!

Naciśnięcie przycisku włącz / wyłącz spowoduje, że leżanka automatycznie ustawi się w pozycji spoczynku.

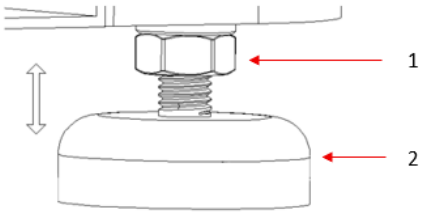


Gumowe podkładki

Model wyposażony został w regulowane nóżki z gumowymi podkładkami, które dzięki obrotowej śrubie pozwalają na precyzyjne wypoziomowanie mebla nawet na nierównym podłożu.
By wyregulować przekręć śrubę w górę, jak pokazano na zdjęciu obok.



Regulacja podłokietników


Jedną ręką pociągnij w górę czarną wajchę znajdującą się pod podłokietnikiem i ciągle trzymając, użyj drugiej ręki by delikatnie nacisnąć na podłokietnik w dół. Puść wajchę.

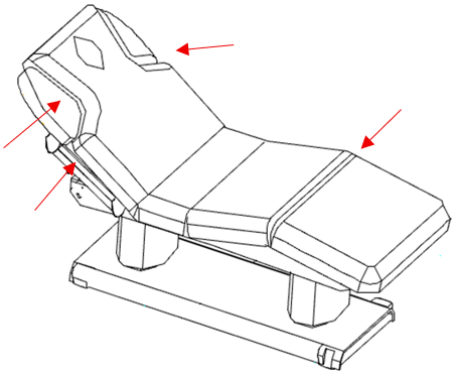


Uwaga!

Prosimy pamiętać, aby podczas elektrycznej regulacji łóżka nie wkładać palców ani innych części ciała w szczeliny mechanizmu (na zdjęciu oznaczone strzałkami). Szczeliny mogą ulec zwężeniu i spowodować uraz ciała.

Zakres ruchu części ruchomych

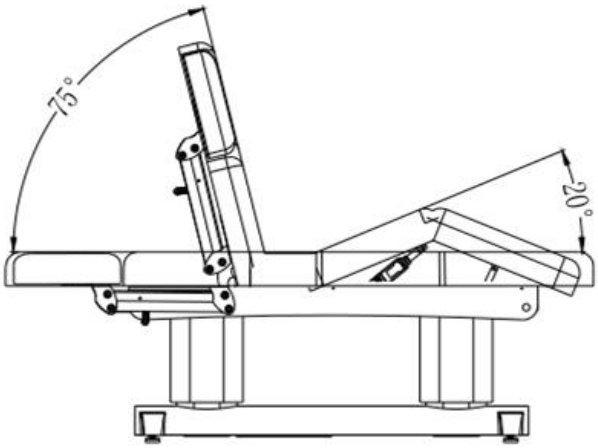

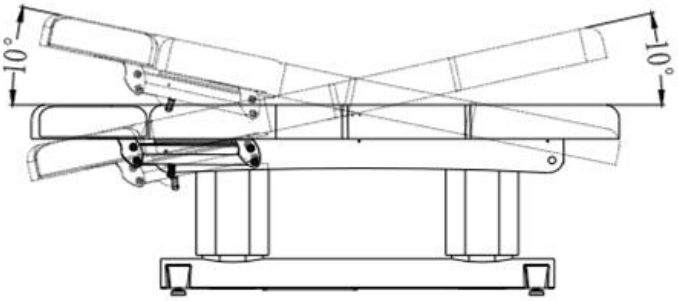

Zakres regulacji oparcia 0 - 75°
Zakres regulacji zgięcia pod kolana 0 - 20°
Zakres regulacji przechylenia wynikającego z obniżenia lub podwyższenia pojedynczej kolumny 0 - 10°

Wymiary urządzenia



Długość całkowita powierzchni do leżenia 200 cm
Regulacja wysokości stołu min 63 cm, max 81 cm od podłoża
Regulacja podłokietników min 44 cm, max 63 cm od podłoża

Czyszczenie i konserwacja

Aby utrzymać powierzchnię leżanki w dobrym stanie należy ją regularnie czyścić, najlepiej po każdym użyciu. Dokładną dezynfekcję zaleca się wykonać raz w miesiącu.

- Powierzchnie metalowe i plastikowe, oraz elementy sterujące zalecamy przetrzeć wilgotną ściereczką. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i rogów najlepiej sprawdzi się mała szczoteczka. Nie należy stosować zbyt dużej ilości płynów. Po wyczyszczeniu zdezynfekuj urządzenie odpowiednim środkiem.
- Powierzchnie ze stali nierdzewnej czyścimy roztworem detergentu. Do usuwania trudnych plam sprawdzi się amoniak i większość rozpuszczalników. Nie należy używać roztworów na bazie chloru.
- Powierzchnie metalowe malowane lub chromowane
  - ✓ Nie używaj dysz wodnych (prysznic, wysokociśnieniowe armatki wodne)
  - ✓ Nie czyść w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza
  - ✓ Nie używaj rozpuszczalników ani kwasów
- Tapicerkę leżanki należy przetrzeć środkiem do czyszczenia skór syntetycznych, a następnie przetrzeć powierzchnię suchą i miękką ściereczką.

Środki bezpieczeństwa:

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami.

Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.