ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Syis urządzenie Dermo Lift&Peel skin scrubber



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025

Scan for diferent languages

❗ **PRZECIWWSKAZANIA DO ZABGIEGU:**

- ciąża
- zranienia, otarcia skóry
- zmiany grzybicze, bakteryjne, wirusowe
- choroby układu nerwowego
- choroby psychiczne
- epilepsja
- nowotwór (w trakcie leczenia i po)
- infekcje
- partia skóry, pod którą znajduje się metal (np. metalowe implanty w kości po jej złamaniu), plastik, silikon (np. implanty silikonowe w piersiach)
- partie skóry, w której znajdują si instrumenty medyczne i elektroniczne takie jak: aparat słuchowy, rozrusznik serca, sztuczne serce itp.
- dzieci poniżej lat 12
- partie skóry z elementami metalowymi w ciele (np. kolczyk w brzuchu)
- nadciśnienie tętnicze
- cukrzyca
- choroby serca

Pełen zabieg obejmuje oczyszczanie skóry za pomocą peelingu kawitacyjnego oraz wtłaczanie substancji aktywnych zawartych w ampułkach za pomocą sonoforezy. **Przed zabiegiem dezynfekujemy metalową część szpatuły (nie pryskamy szpatuły bezpośrednio płynem).**

Dane techniczne:

- Peeling kawitacyjny 25kHz
- Ultradźwięki 2MHz
- Napięcie 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Ładowarka:
  Wejście AC 100-240 V, 50/60 Hz
  Wyjście DC 5,5 V, 500 mA
- Bateria DC 3,7V 850mA
- Moc maksymalna 1.5 W±10%

Przeprowadzanie zabiegów:

Przed zabiegiem wykonaj peeling, tonizacje i demakijaż

PEELING KAWITACYJNY


- Zwilżamy skórę tonikiem lub płynem micelarnym SYIS. Podczas peelingu kawitacyjnego skóra musi być zwilżona, dzięki temu dochodzi do zjawiska kawitacji. Ważne, aby podczas zabiegu regularnie powtarzać czynności, aby nie wystąpił efekt pieczenia. Tworzą się wówczas mikroskopijne pęcherzyki gazu oraz szereg procesów chemicznych, których efektem jest rozbicie martwych komórek warstwy rogowej naskórka.
- Przyciskiem START/STOP uruchamiamy urządzenie,
- Przyciskiem MODE ustawiamy niską częstotliwość - oczyszczanie powierzchowne lub wysoką częstotliwość - oczyszczanie głębokie (patrz Rys.1).
- Metalowa część szpatułki musi być prowadzona pod kątem 45 stopni od powierzchni skóry (patrz rys.2). Przesuwamy szpatułkę od środka twarzy no zewnątrz (patrz rys. 3), nie zatrzymując się w miejscu. Czas zabiegu to ok. 10 minut.

SONOFOREZA

- Przed rozpoczęciem zabiegu sonoforezy nakładamy na twarz żel do ultradźwięków SYIS zmieszany z wybraną ampułką SYIS
- Przyciskiem START/STOP uruchamiamy urządzenie
- Przyciskiem MODE ustawiamy niską częstotliwość - wtłaczanie powierzchowne lub wysoka częstotliwość - wtłaczanie głębokie (patrz rys.1)
- Szpatułkę odwracamy i przesuwamy gładką końcówką metalu po skórze pod kątem 45 stopni od powierzchni skóry (patrz rys.4). Szpatułkę przesuwamy powoli od środka twarzy na zewnątrz (patrz rys. 3), nie zatrzymując się w miejscu. Pamiętajmy, aby w miejscu wtłaczania skóra pokryta była żelem. Czas zabiegu to ok. 10 minut





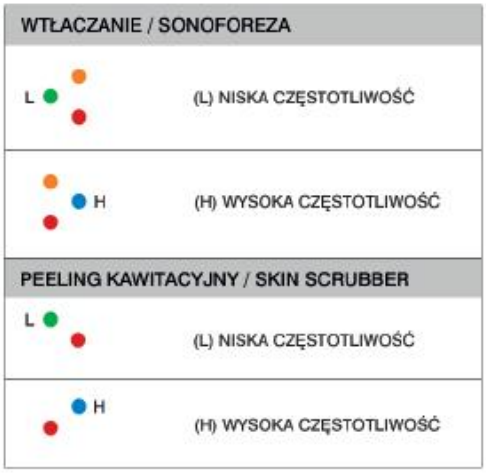


Rys.1 Sposób wyświetlania się diod w poszczególnych trybach pracy




OCZYSZCZANIE

Rys. 2 Sposób w jaki należy trzymać szpatułę podczas zabiegu oczyszczania - kąt 45°

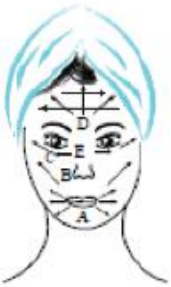

Rys. 3 Kierunki poruszania szpatułą podczas zabiegu oczyszczania i sonoforezy.

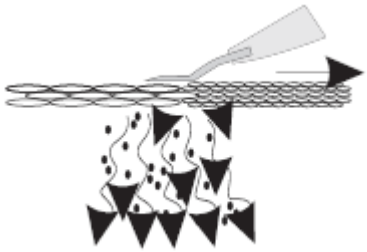

WTŁACZANIE

Rys. 4 Sposób wykonywania zabiegu sonoforezy

PIELĘGNACJA UZUPEŁNIAJĄCA

- Po zakończeniu zabiegu w celu złagodzenia zaczerwienienia nakładamy wybraną maskę algową SYIS. Maska dodatkowo odżywi skórę, rozświetli i ujednolici jej koloryt.
- Po ściągnięciu maski aplikujemy dopasowany do cery krem marki SYIS.

Uwaga!

- Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować próbę stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać serwis w firmie ACTIVESHOP.
- Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu mokrych miejsc lub mokrymi rękami, należy zwrócić uwagę, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
- Proszę wyjąc wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z serwisem w firmie ACTIVESHOP w następujących przypadkach:

  - płyn dostał się do urządzenia

  - urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,

  - przewód zasilający został uszkodzony,

  - urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

- Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów no kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których przewód zasilający może ulec uszkodzeniu.
- Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot wpadnie do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
- Nie wolno umieszczać urządzenia no niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku,
  urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca si zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania między włączeniem a wyłączeniem i odwrotnie).
- Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia czy nawet jego spalenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.