ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stół rehabilitacyjny do masażu i fizjoterapii elektryczny Balance Novus 4



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2026

Scan for different languages

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Stół rehabilitacyjny Balance Novus 4 z elektryczną regulacją wysokości został zaprojektowany z myślą o gabinetach fizjoterapii, rehabilitacji oraz masażu. Doskonale sprawdza się podczas terapii manualnych, masaży leczniczych i relaksacyjnych oraz zabiegów wymagających precyzyjnego ułożenia klienta. Stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa oraz funkcjonalne rozwiązania wspierają komfort codziennej pracy specjalisty. Nowoczesna forma z charakterystyczną, wyprofilowaną podstawą nadaje całości lekki, elegancki wygląd, doskonale komponując się z wyposażeniem profesjonalnych gabinetów.

Dane techniczne	
Materiał obicia	Skóra syntetyczna
Maksymalne udźwig	200kg
Ilość siłowników	1

Budowa urządzenia

1. Zagłówek
2. Zaślepka w zagłówku
3. Podłokietniki
4. Pilot
5. Regulacja wysokości nożna
6. Uchwyt na ręcznik



Regulacja zagłówka

Tuż pod zagłówkiem znajduje się metalowy uchwyt. Pociągnij go delikatnie do góry, a następnie ręcznie wyreguluj optymalną kąt nachylenia zagłówka. Po ustawieniu pozycji puść uchwyt, aby zablokować mechanizm.




Regulacja podłokietników

Pod podłokietnikiem znajduje się metalowy pręt z pokrętłem blokującym. Aby zmienić pozycję, poluzuj pokrętło, ustaw optymalną wysokość podłokietnika, a następnie mocno dokręć pokrętło, aby bezpiecznie zablokować element.



Funkcje pilota

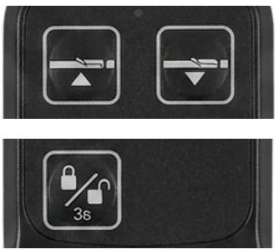

Regulacja wysokości

Blokada

Dla większej wygody pilot można odwiesić na uchwycie przy blacie, co zapobiega jego przeszkadzaniu w trakcie pracy.

Regulacja wysokości nożna

Naciśnij stopą metalowy łuk znajdujący się w dolnej części łóżka, a następnie delikatnie przesuń go w pozycji poziomej (równolegle do podłogi) w przód lub w tył, aby ustawić preferowaną wysokość blatu. Czynność tę można wykonać z obu stron stołu.




Uchwyt na ręcznik

Praktyczny uchwyt umieszczony przy podnóżku umożliwia wygodne zawieszenie ręcznika.



Wymiary urządzenia

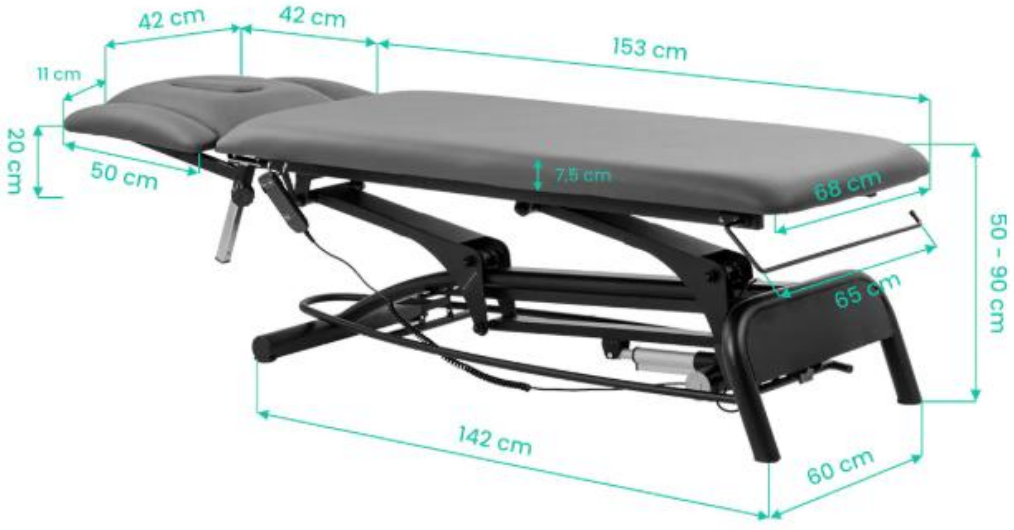

Wymiary zaślepki na zagłówku 22,5 x 11,5 cm
Maksymalne obciążenie stołu wynosi 200kg.

Zalecenia

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat

prawidłowego korzystania w sposób bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.