ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wapozon Giovanni D-09

Model: DT-8228 White



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scan for different languages

Wielofunkcyjny wapozon Giovanni D-09 z ciepłą parą i ozonem.
Wapozon osadzony jest na statywie z regulowaną wysokością, co znacznie ułatwia wykonywanie zabiegów. Para wydobywająca się z urządzenia otwiera zatkane pory, umożliwia głębokie oczyszczanie skóry, dotlenia skórę i oczyszcza ją z toksyn. Zabieg poprawia także krążenie krwi.


Działanie urządzenia:

1. Zmiękcza skórę,
2. Dezynfekuje pory,
3. Rozszerza pory,
4. Stymuluje ukrwienie skóry,
5. Ułatwia usuwanie zaskórników i martwego naskórka,
6. Nawilża i odświeża skórę,
7. Poprawia kondycję skóry.

Dane techniczne


Napięcie	220-240V
Moc	850W
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Pojemność pojemnika na wodę	600ml
Temperatura pary	Ok. 40^{o}C
Waga	4kg

Wymiary urządzenia

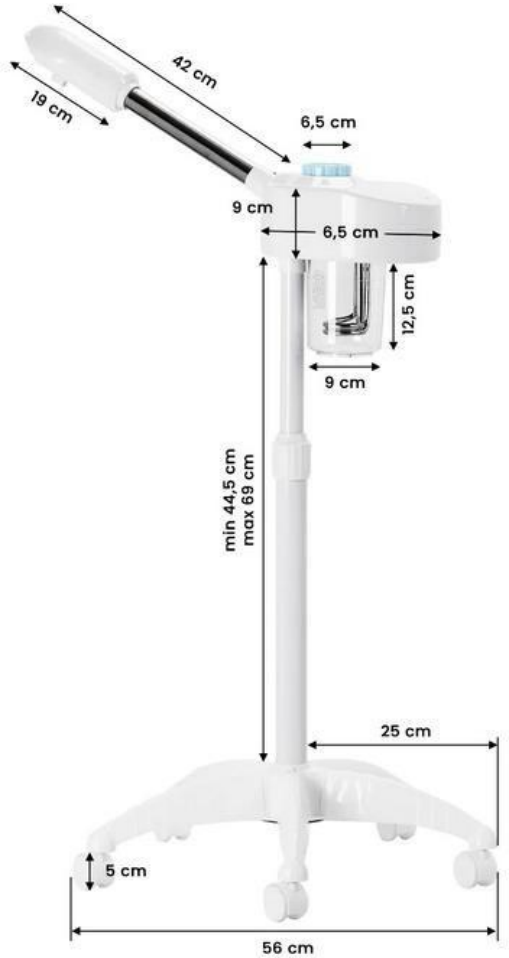

Przygotowanie:

1. Przed użyciem wapozonu usuń wszelkie elementy opakowaniowe.
2. Umieść urządzenie w miejscu, gdzie będzie używane. Najlepiej na płaskiej i stabilnej powierzchni.
3. Odkręć pojemnik na wodę i uzupełnij go czystą, najlepiej przefiltrowaną wodą. Następnie szczelnie zakręć zakrętkę.
4. Podłącz urządzenie do właściwego źródła prądu.
5. Aby włączyć urządzenie przytrzymaj przez dłuższą chwilę przycisk HOT.
6. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy (buczenie) w przypadku braku, zanieczyszczenia lub niedostatecznej ilości wody.
7. Aby uruchomić zabieg ciepłą parą uzupełnij zbiornik na wodę do pełna i przytrzymaj przycisk HOT. Grzałka zacznie podgrzewać wodę, a po kilku minutach będzie wydzielać się ciepła para. Ponownie przytrzymaj przycisk HOT, aby wyłączyć tą funkcję.
8. Aby włączyć funkcję ozonu przytrzymaj przez dłuższą chwilę przycisk LIGHT. Włączy się ozon, a ilość pary się zwiększy. Przytrzymaj przycisk ponownie, aby wyłączyć tą funkcję.

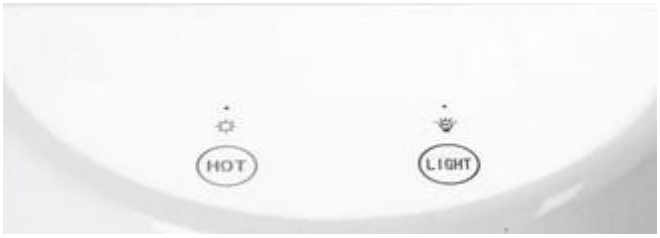

9. Głowicę wapozonu można dowolnie obracać.

Instrukcja obsługi urządzenia:

1. Utrzymuj dyszę w odległości ok. 20cm od twarzy, aby uniknąć poparzeń.
2. Para zacznie się wydobywać po kilkudziesięciu sekundach od włączenia i nagrzania urządzenia.
3. Jeśli ilość wody będzie niewystarczająca, to strumień pary będzie się stopniowo zmniejszał. Urządzenie wyłączy się, jeśli wody będzie za mało.
4. Nie wyciągaj pojemnika na wodę od razu po wyłączeniu. Odczekaj ok. 10 minut, aby pojemnik się ostudził. Pozwoli to uniknąć ewentualnego poparzenia.
5. Jeżeli urządzenie wyłączy się automatycznie z powodu braku wody, odczekaj ok. 2 minuty aż kontrolka się zresetuje, a urządzenie będzie gotowe do ponownego działania.
6. Kontroluj stan wody podczas zabiegu i uzupełnij zbiornik, jeśli poziom wody osiągnie minimum.

FUNKCJE:

1. Urządzenie wyłączy się automatycznie, kiedy poziom wody w zbiorniku będzie niewystarczający.
2. Urządzenie wytwarza ciepłą parę.
3. Urządzenie posiada funkcję „ozon”.

UWAGA!

Nadmierne stosowanie może być szkodliwe dla skóry. Początkowo urządzenie powinno być używane tylko raz dziennie, nie dłużej niż 10 minut. Używaj 2-3 razy w tygodniu do skóry normalnej i raz w tygodniu do skóry wrażliwej.

UWAGA!

Nie wlewaj do zbiornika na wodę olejków eterycznych ani żadnych innych płynów poza wodą. Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub urazów fizycznych.

Zalecenia:

1. Zabrania się używania urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innego wilgotnego naczynia. Nie wolno używać lub przechowywać urządzenia w łazience lub innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Może to doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia izolacji. Nie można zanurzać urządzenia w wodzie.
2. Zabrania się używać urządzenia przez osoby mające problem z odczuwaniem ciepła. Może to spowodować poparzenia.
3. Zaleca się natychmiast zaprzestać używania urządzenia, jeśli wystąpią jakiekolwiek bóle lub nieprawidłowości na skórze czy ciele.
4. Przeciwwskazania do używania produktu:
- Ciąża, menstruacja, zaburzenia hormonalne,
- Alergie, choroby skóry, atopowe zapalenie skóry, bardzo wrażliwa skóra lub poparzona słońcem,
- Obrażenia skóry, wypryski, obrzęki etc.,
- Niedawno przebyte operacje chirurgiczne.
5. Podczas podłączania wtyczki nie dotykaj jej metalowych elementów. Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka, kiedy nie używasz urządzenia
6. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji kurzu. Wilgoć i inne czynniki mogą spowodować przebicie izolacji. Zapobiegać dostaniu się kurzu lub innych szkodliwych elementów do wtyczki.
7. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia, może to spowodować wadliwe działanie przewodu. Nie należy używać urządzenia, kiedy przewód lub wtyczka nagrzewa się lub jest uszkodzona oraz gdy wtyczka jest luźna w gniazdku.
8. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane ze źródła o właściwym napięciu znamionowym. Upewnij się, że wtyczka została prawidłowo podłączona do gniazdka. Zaniechanie może doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub poparzenia. Nie można podłączać i odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi lub wilgotnymi dłońmi. Nie można modyfikować, rozciągać, nadmiernie wyginać lub skręcać przewodu. Nie można umieszczać niczego ciężkiego na przewodzie.
9. Nie pozwalać dzieciom używać urządzenia.
10. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji takich jak: alkohole, rozpuszczalniki, benzyna, aerozole w spreju etc. Może to doprowadzić do eksplozji lub pożaru.
11. Nie wolno uderzać i rzucać urządzeniem. Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku, nie można kontynuować jego użytkowania.
12. Nie można wkładać żadnych elementów w dyszę, ani przytykać jej, ponieważ może to doprowadzić do porażenia elektrycznego. Nie próbuj demontować ani naprawiać sprzętu. W celu naprawy, skontaktuj się z dystrybutorem, od którego sprzęt został zakupiony albo autoryzowanym serwisem
13. Nie dotykaj zbiornika na wodę, gdy urządzenie jest włączone.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.